


일상에서 함께 하는 맞춤형 AI 마음관리, 위돌라이프



WeeDool-Life

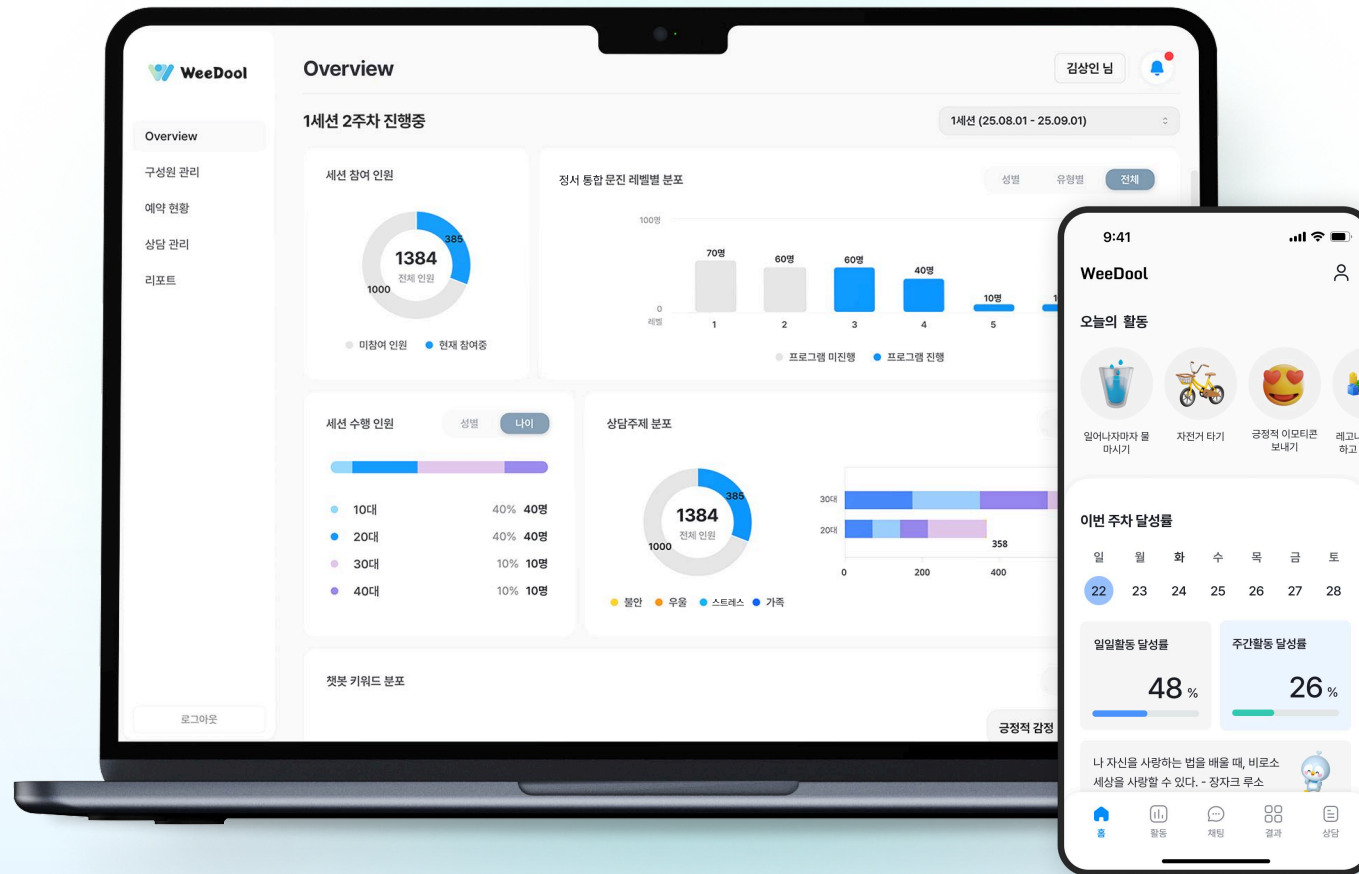

WeeDool-Life

Contents

01 위둘은 무엇인가요?

02 행동활성화(BA) 및 문진 소개

03 위둘라이프 앱

1. 가입 시 문진을 통해 개인 맞춤형 구성
2. 개인 상담 & 예약 관리
3. 개인 AI 챗봇 기능
4. 개인별 맞춤 행동활성화 수행
5. 개인 활동 리포트

04 위둘 웹 관리자용

1. 오버뷰
2. 종합 리포트

05 위둘 웹 상담사용


1. 구성원 관리 (상담사 전용 화면)
2. 내담자 챗봇 모니터링 (상담사 전용 화면)

위돌라이프란?

위돌라이프는 기관(회사, 대학교, 공공기관 등) 구성원의 마음·정신건강을 체계적으로 측정하여 자기 돌봄(Self-Caring)하기 위한 **행동활성화(BA) 기반 AI 디지털 프로그램**입니다.

행동활성화(BA)는 참여자 스스로가 자신의 정서·감정과 행동을 기록하며 나만의 **긍정적 루틴**을 만들어가는 솔루션입니다.

- 정신건강 관리 목적의 AI 기반 프로그램
- AI와 문진 데이터를 활용한 개인 맞춤 관리
- 기관 단위 진행 및 관리자 리포트 제공

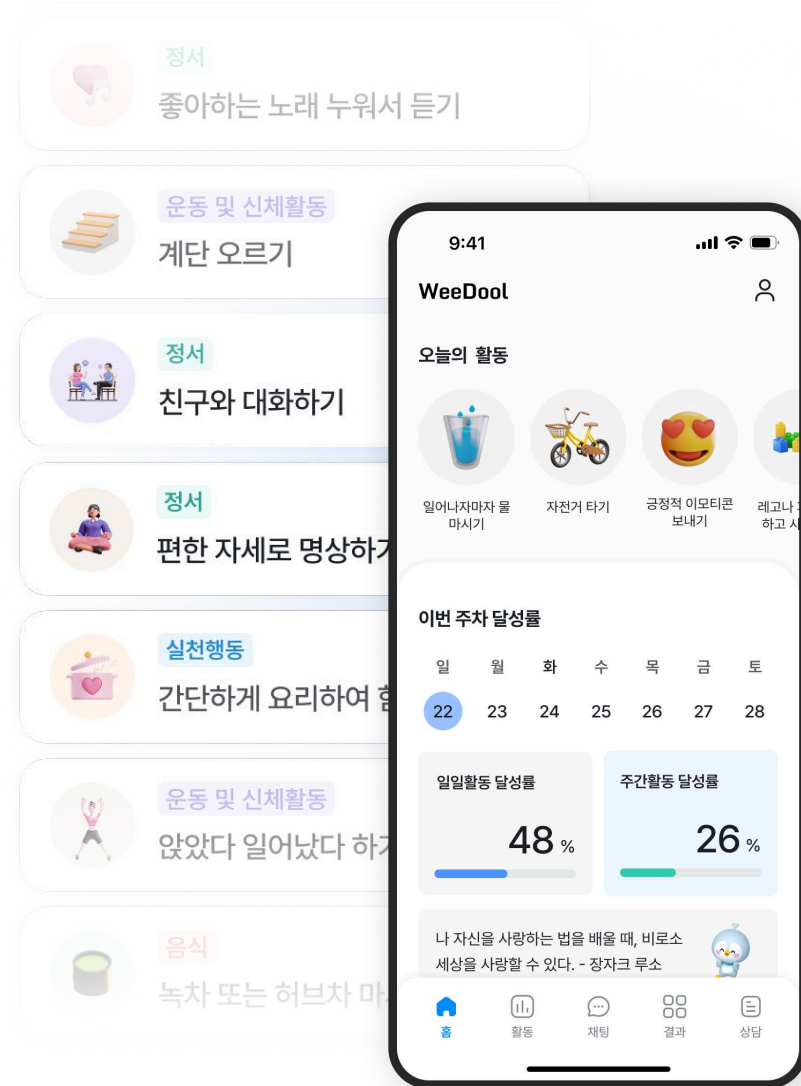

위돌은 언제 필요할까요?

우리 조직 구성원, 이런 모습이 보인다면 위돌라이프가 필요합니다.

☒   업무(학업) 스트레스나 피로를 호소하는 구성원이 많다.

☐ 조직 내 스트레스 관리 프로그램이 형식적으로 운영된다. 

☐  구성원들이 스스로 참여하고 실천할 수 있는 마음·정신 관리 프로그램이 필요하다.

☐  우울, 불안, 무기력을 보이는 구성원이 있다.

☐ 구성원들의 심리상담 지원과 기본적인 정서 관리가 필요하다. 

☐ 구성원 간 커뮤니케이션이 좋고, 조직 분위기가 침체되어 있다.

☐  구성원들의 마음·정신건강 상태를 객관적으로 파악하기 어렵다.

☐ 데이터 기반으로 구성원의 정서 변화에 도움을 주고 싶다. 

위 항목 중 3가지 이상 해당된다면,
지금 바로 정신건강 관리 시스템을 도입해야 할 때입니다.

AI 기반 맞춤형 행동활성화 프로그램 '**위돌라이프**'가
개인의 정서 회복과 건강한 공동체를 함께 만들어갑니다.

위돌라이프 구성

1 통합 정서 건강 관리

- 내담자와 관리자를 위한 맞춤 솔루션
- 내담자용 앱과 관리자용 웹으로 구성
- 성별, 소속별로 세분화된 관리 가능

2 AI 기반 맞춤 가이드

- AI 연산으로 개인문진과 정서 통합 문진을 조합한 행동활성화 가이드
- AI를 활용한 개인 분석 자료 제공

3 상담 및 프로그램 관리

- 전문 상담사 매칭, 예약, 챗봇 상담 지원
- 내담자는 정서 통합 문진 점수를 활용한 정서적인 건강점수를 확인 가능
- 전문 상담사의 추천을 통해 적합한 솔루션 선택


4 경과 확인

- 이용자는 4주간 프로그램 수행 후 정서 통합 문진을 재진행하여 경과 확인
- 이용자는 점수 경과에 따라 지속 여부 결정


행동활성화(BA)란?

행동활성화(Behavioral Activation, BA)는 우울·불안 관련하여 **긍정적인 행동을 늘리고 회피 행동을 줄이는** 데 초점을 두고 있는 **자기 돌봄 솔루션**입니다.

- 1974년에 발행된 Peter Lewinsohn의 우울증에 대한 행동 접근법 논문에서 우울증 치료에 대한 혁신적인 관점 및 치료 방법을 처음으로 제시
- BA(행동활성화)의 우울 및 불안 관련 감소 및 회복에 대한 유효성이 여러 임상적 실험을 통해 검증됨

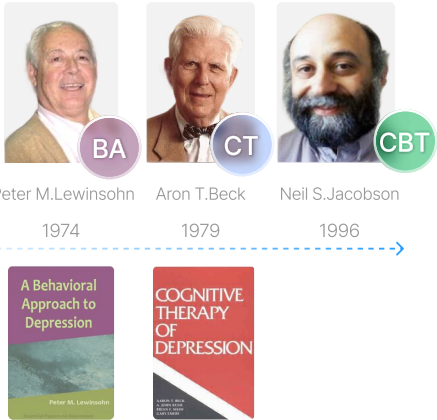


AI 기반 개인 맞춤형
행동활성화 추천

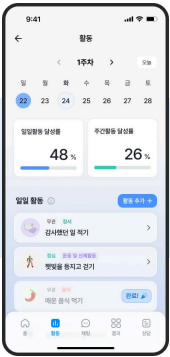

맞춤형 행동활성화 구성




BA 리스트 추천과 선택

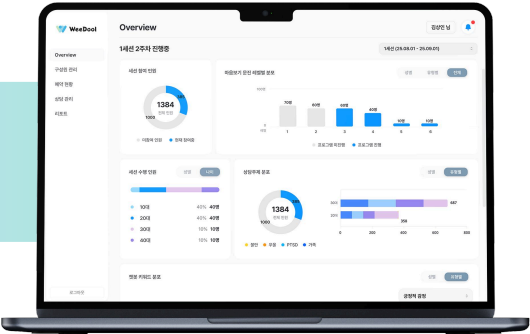

모니터링 및
AI 유효성 기반 BA 재구성

정서 통합 문진이란?


우울 및 불안 정서, 직무 스트레스, 주의력 결핍 및 과잉 행동을 측정할 수 있도록
임상환경에서의 데이터를 통합하여 개발한 문진 툴

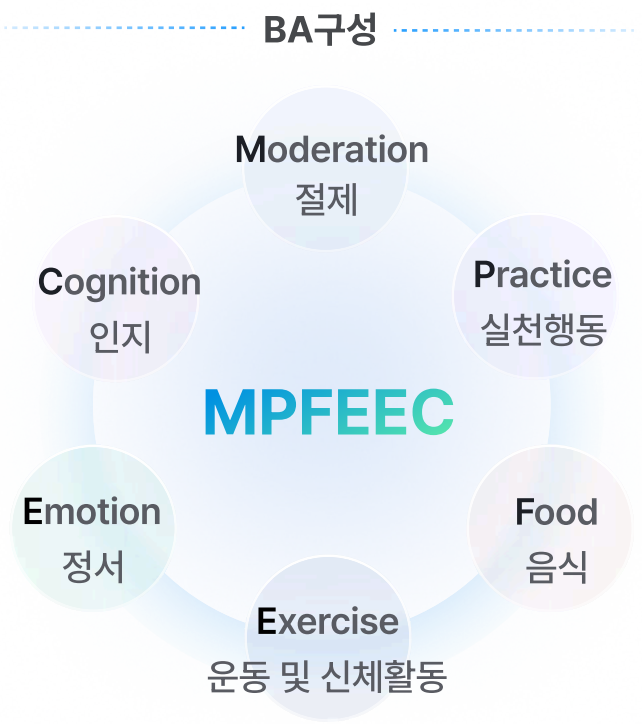

튜링바이오 보유 연관 특허 목록

- MPFEEC 행동활성화 모델을 적용한 우울증 디지털 치료 시스템 및 그 방법
- 디지털 마커 기반 강화학습이 적용된 행동활성화 치료 프로세스 및 인공지능 시스템
- 메타버스를 이용한 우울증 디지털 치료 시스템 및 그 방법

위돌 앱은 어떻게 진행되나요?

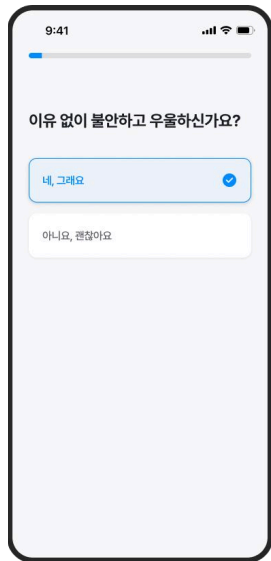


01 가입 시 정서 통합 문진 수행



02 정서 통합 문진 점수 확인,
점수에 따라 수행 여부 결정



03 행동활성화 프로그램 수행



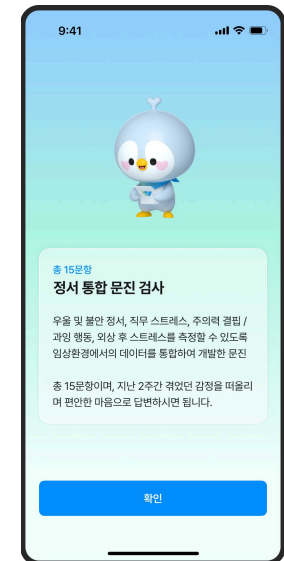


04 최초 검사 4주 후
정서 통합 문진 재검사


*정서 통합 문진 : 우울 불안 정서, 직무 스트레스, 주의력 결핍 및 과잉 행동을 측정할 수 있도록 임상환경에서의 데이터를 통합하여 개발한 문진 툴

개인 상담 & 예약 관리

앱을 활용하여 내담자가 원하는 상담사를 골라 원하는 날짜와 시간에 예약을 할 수 있습니다.

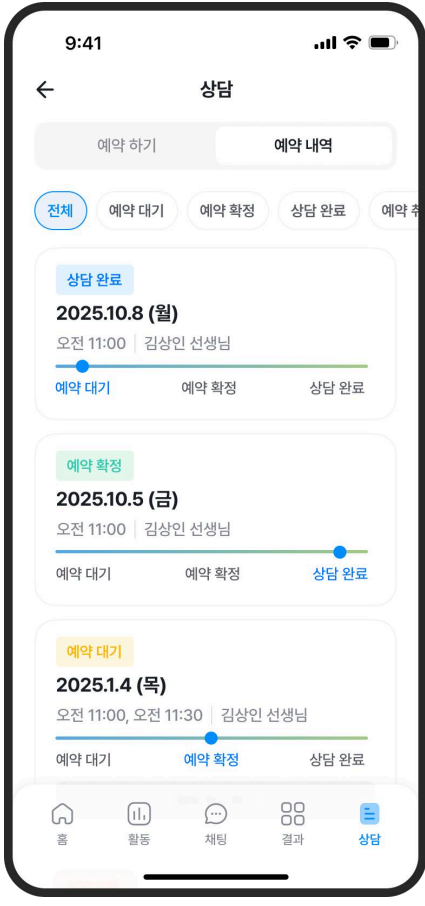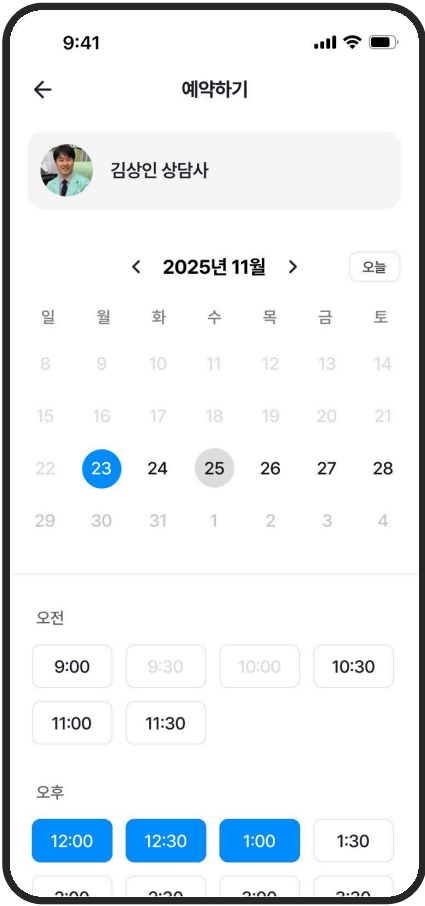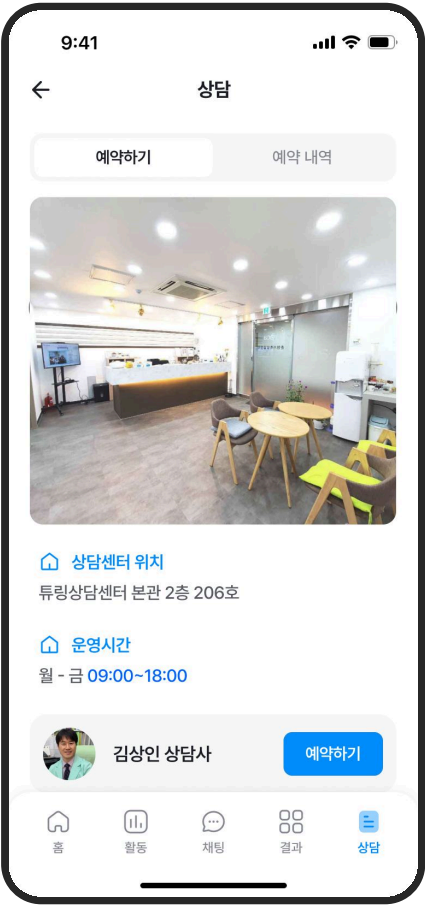



개인 AI 챗봇 기능

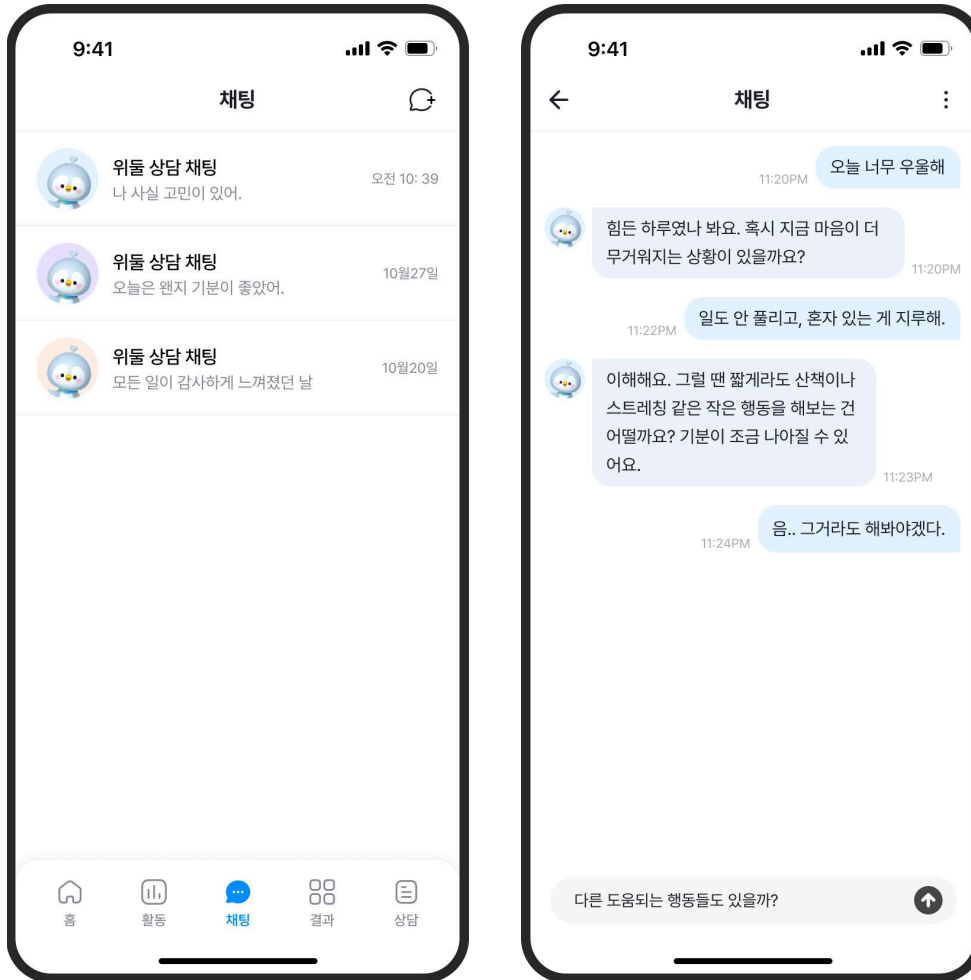

- 챗봇과의 채팅은 24시간 제공되며, 시간적인 제약이 있는 경우 앱에서 내담자가 부담없이 위돌 챗봇과 채팅 상담을 할 수 있습니다.
- 모든 채팅 내용은 암호화되어 본인 외 타인이 조회 불가합니다.



개인별 맞춤 행동활성화 수행

- 정서 통합 문진 결과를 확인한 후 본인의 선택에 따른 개인별 행동들을 앱에서 직접 선택하여 수행할 수 있습니다.
- 상담사의 가이드에 따라 내담자는 활동 추가를 자유롭게 할 수 있으며, 행동 전후 감정을 체크하고 행동에 대한 설명 또한 인지함으로써 활동 수행 정도를 트래킹할 수 있습니다.

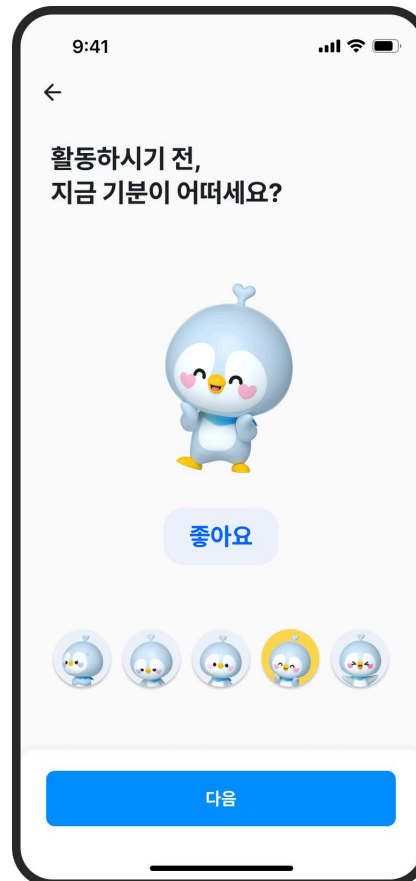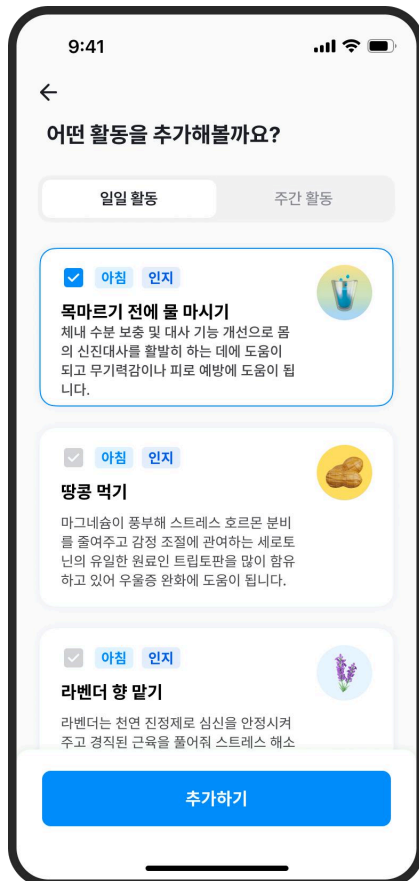

개인 활동 리포트

- 내담자는 자신의 활동 수행 결과에 대한 분석 리포트를 앱에서 직접 확인할 수 있습니다.
- 활동 기분 기록, 활동 전후 기분 분포, 일별/주별의 달성률 등에 대한 정보가 표시됩니다.

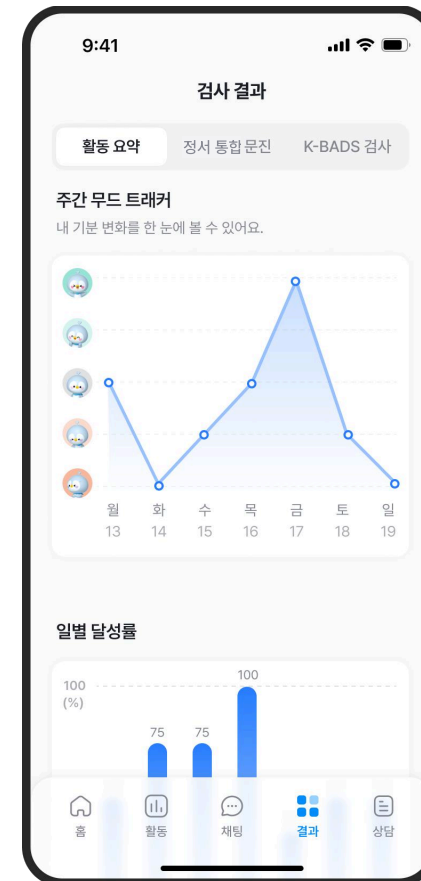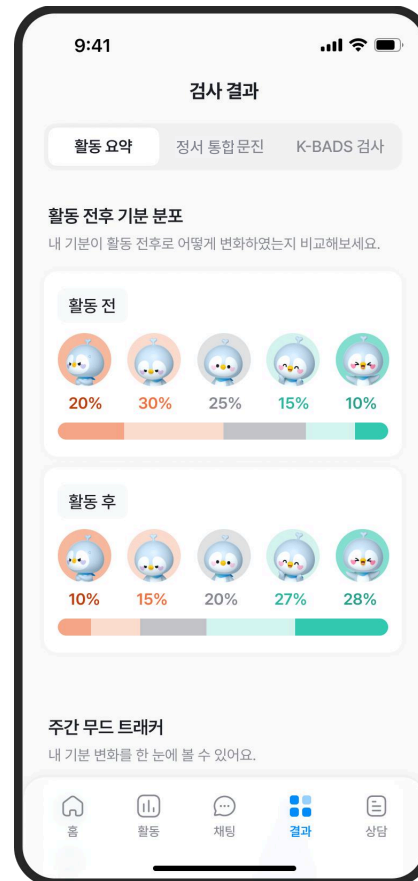


04 위돌 웹 소개

위돌 웹은 어떻게 진행되나요?


01 오버뷰

전체 내담자 및 소속별 현황 파악, 알림 확인

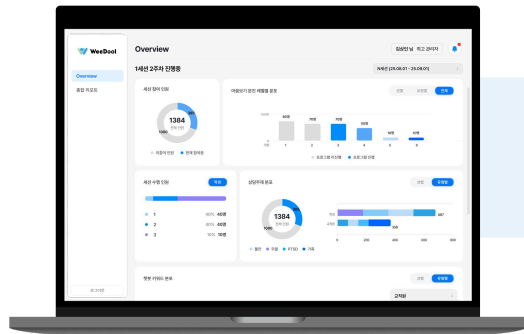


02 구성원 관리 (상담사 전용)

개인 문진 및 상담 현황 파악, BA 수행 내역 확인

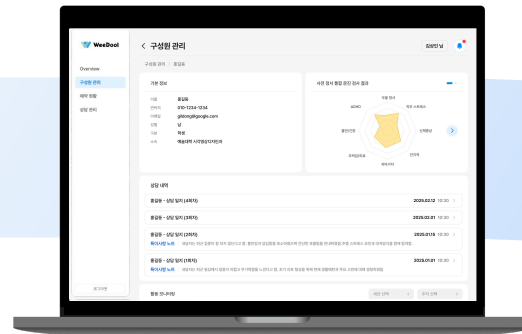

03 행동 수행 현황 모니터링 (상담사 전용)


내담자의 수행 현황을 다각적으로 검토

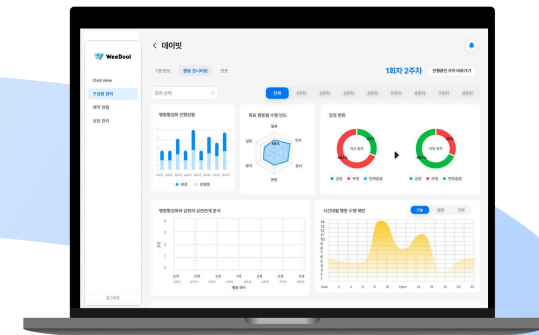

05 결과 리포트


04 챗봇 모니터링 (상담사 전용)

개인 챗봇 분석자료 확인

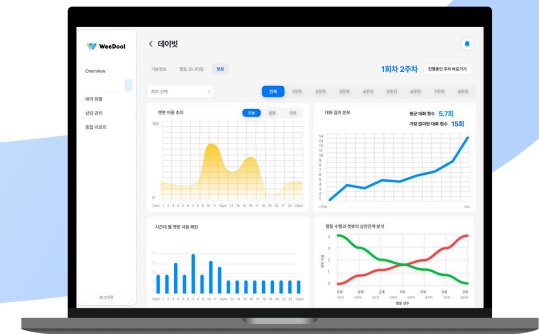

Overview

관리자용 웹에서는 전체 이용자를 대상으로 세션 참여 현황, 정서 통합 문진 레벨별 분포, 상담주제 분포 등을 한눈에 확인할 수 있습니다.

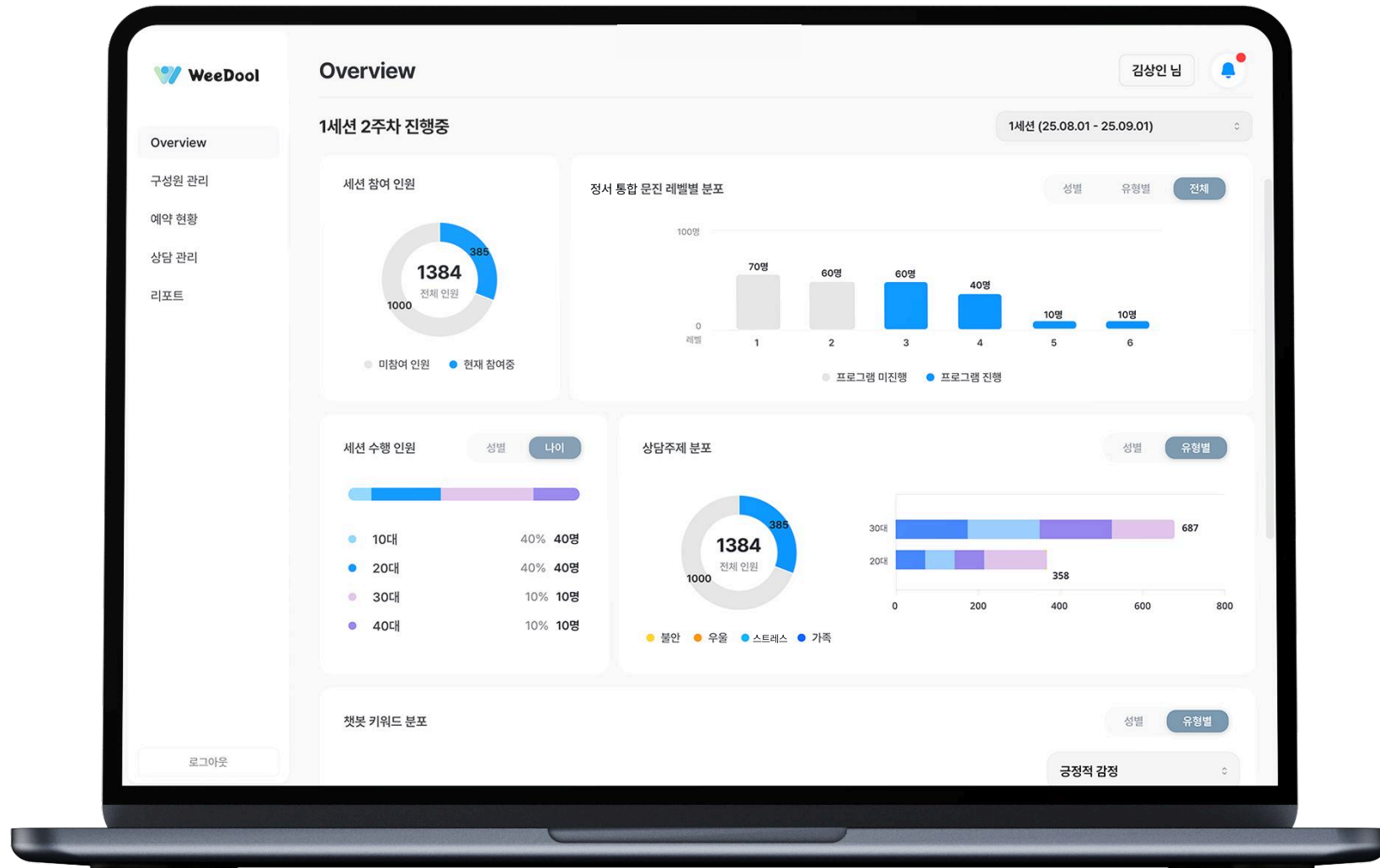

종합 모니터링 리포트

- 이용자가 활동을 모두 끝내고 나면, 관리자에게 위돌라이프 리포트가 발급됩니다.
- 리포트는 정서 통합 문진 레벨별 검사 결과 분포, 행동 수행 전후 차이, 행동 카테고리 비율 및 챗봇 사용률과 AI 분석 결과까지 볼 수 있습니다.
- 리포트는 전체 기관, 소속별로 세분화되어 상세한 분석 결과를 확인할 수 있습니다.
- 리포트에 대한 요약 결과로 해당 이용자 그룹의 정보를 일목요연하게 파악할 수 있습니다.



결과 같습니다.

수 있었으며, 이를 통해 자신감 회복, 기분 전환, 대한 인식과 조절 능력을 향상시킬 수 있었습니다.


n건

가 직접 상담사와의 대면 상담을 예약할 수 있는 기
획 상담 시스템을 보완하여, 보다 능동적이고 즉각
가능하게 했습니다. 실제 상담 연계를 통해 이용자
이 향상된 점이 확인되었습니다.

완하는 도구로써 기능했습니다. 앞으로도 이러한
들의 정신건강 증진은 물론 단체 생활 적응과 공



구성원 관리

- 구성원 관리 페이지에서는 상담사가 내담자의 기본정보 및 상담 내역을 확인할 수 있습니다.
- 앱에서 내담자가 예약한 상담 정보는 웹의 구성원 관리 페이지에 반영됩니다.
- 개인의 상담 내용 / 문진 결과 / 예약 내역 등의 기록은 본인 동의 없이 타인이 조회할 수 없습니다.
(상담 진행 시만 상담사 조회 가능)

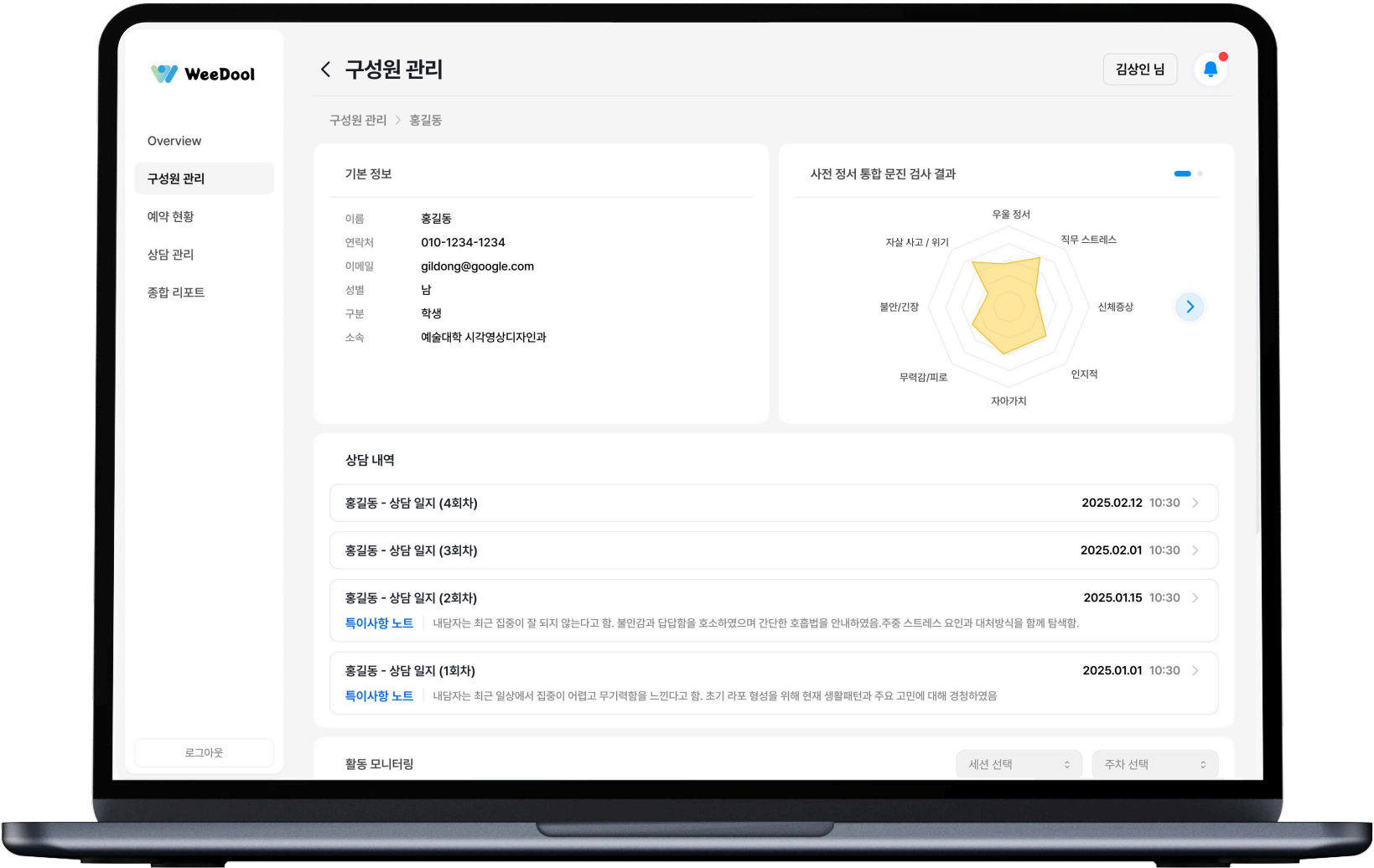



내담자 모니터링

- 내담자 행동 모니터링 페이지에서는 내담자의 행동활성화 진행상황, 수행빈도, 감정 변화 및 행동 진행 패턴까지 확인할 수 있습니다.
- 해당 모든 정보는 내담자가 앱에서 수행하는 활동 정보를 반영합니다.

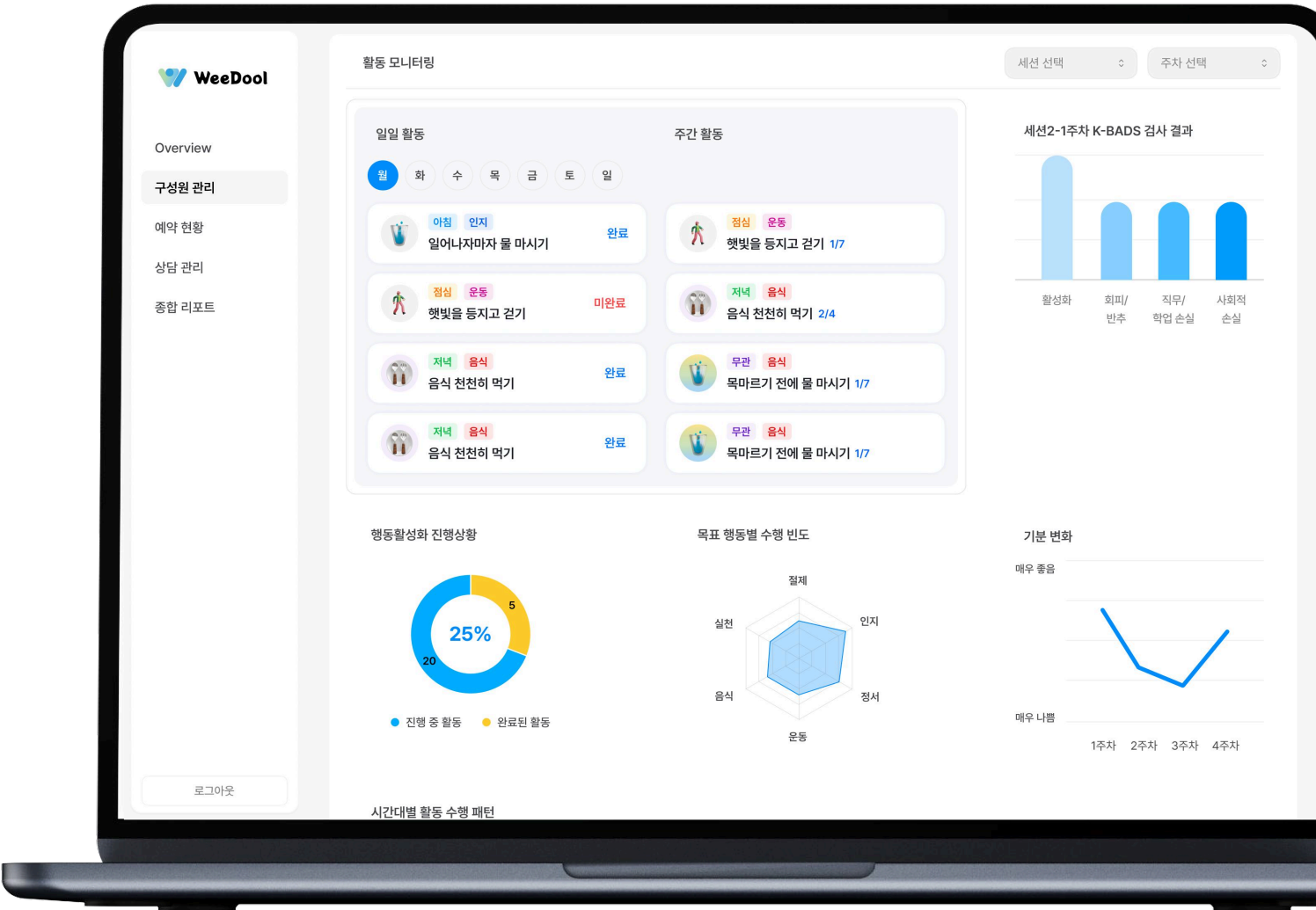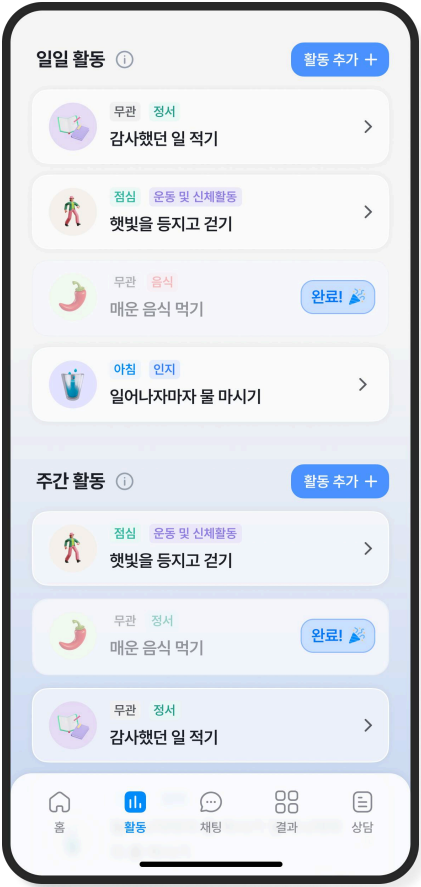


내담자 챗봇 모니터링

- 챗봇 모니터링 페이지에서는 해당 내담자의 챗봇 이용 현황을 파악할 수 있습니다.
- 내담자의 챗봇 이용 추이, 대화길이 분포, 시간대 별 챗봇 사용 패턴 및 상관관계까지 한눈에 볼 수 있습니다.

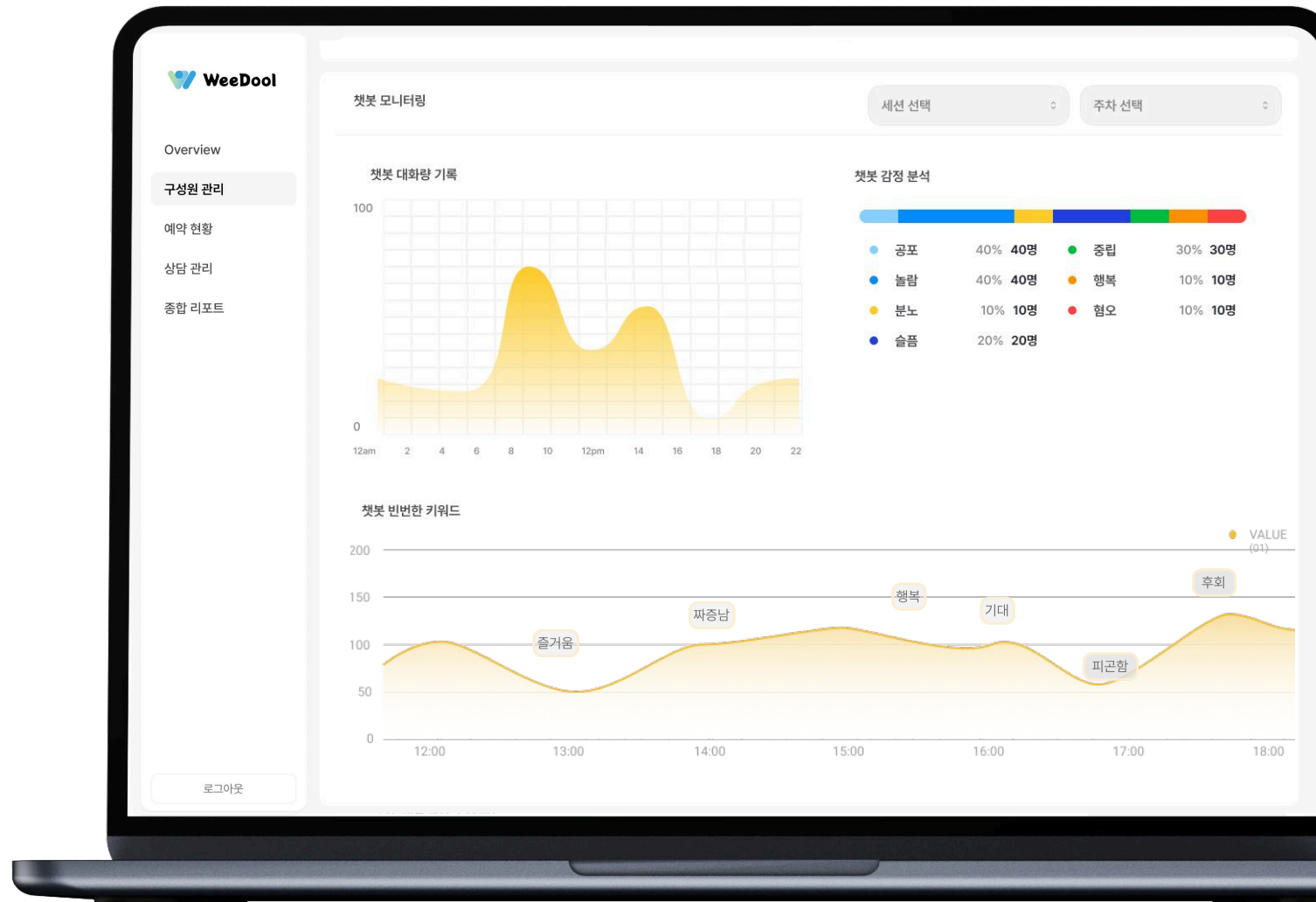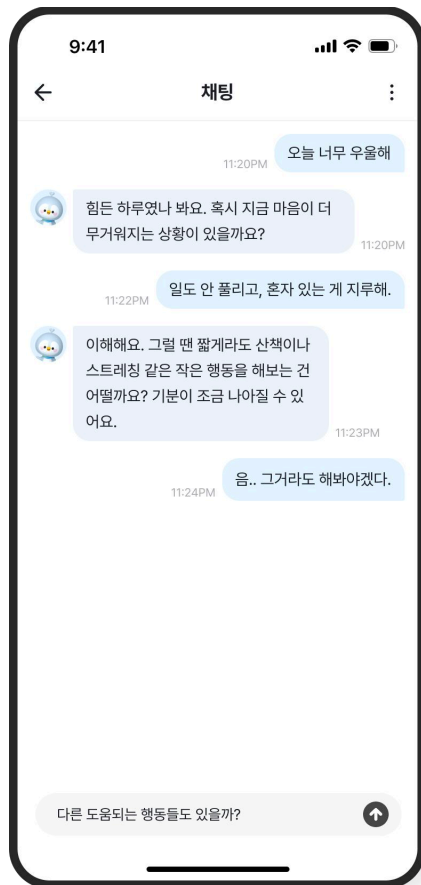

정서 건강을 위한 스마트한 선택

철저한 보안 및 개인정보 보호

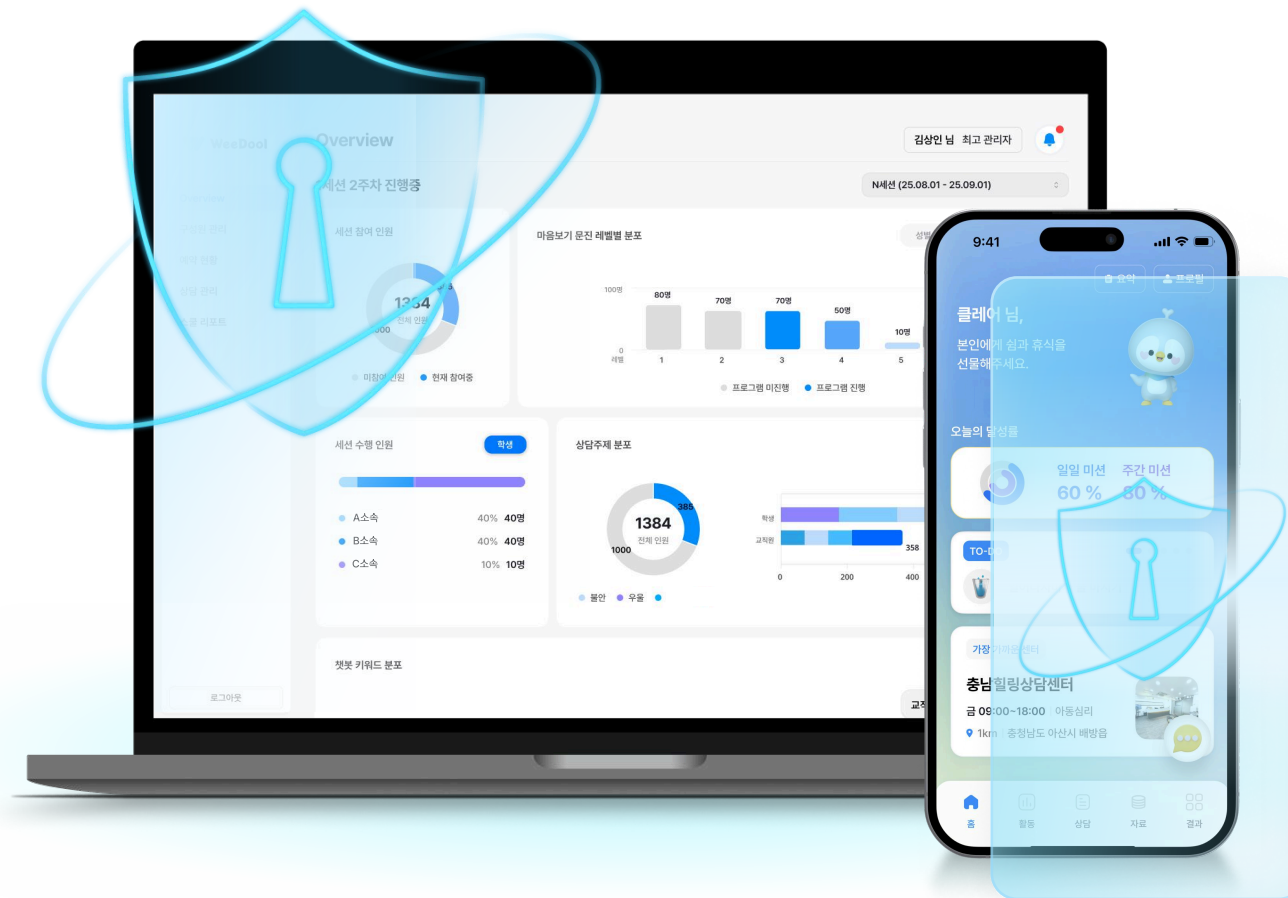

이용자의 문진 결과, 상담 정보는 **철저하게 보안** 유지됩니다.

익명성을 기반으로 모든 개인정보가 관리됩니다.

위둘을 왜 사용해야 하나요?

1 AI 기반 정서 건강 점검

- AI와 정서 통합 문진을 활용하여 이용자의 정보를 조합
- 그룹 구성원의 정서 건강 상태를 점검

3 맞춤형 활동 및 수행 과정 지원

- AI와 상담사가 조치가 필요한 내담자를 대상으로 맞춤 활동 가이드 제공
- 4주 수행기간 동안 개인별 맞춤 과정을 지원

2 철저한 보안 및 개인정보보호

- 익명성을 기반으로 모든 개인정보 관리
- 개인의 모든 상담/문진 등의 정보를 철저히 비밀 유지

4 지속적인 평가 및 정밀 관리

- 4주 수행 전후 정서 통합 문진을 통해 정서 건강을 추적/관리
- AI 기반 그룹 세분화 및 체계적 프로그램과 리포트로 신뢰성 높은 구성원 관리 가능



(주)튜링바이오 | 대표이사 심민보

경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17, 판교세븐벤처밸리2 이랜텍동 9층 (삼평동)

전화번호: 031-600-7560 | 홈페이지 www.turingbio.com | 서비스 이용문의 info@turingbio.com